

# フェイスシールドの作り方(Ⅰ)




武蔵野赤十字病院

クリアファイル下部の  
圧着部分(約7mm)  
をハサミで切り落とします。

## ※注意

このフェイスシールドは  
右のデザインのフレーム  
で使します。

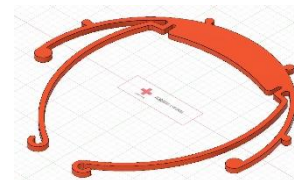

切り落とす幅  
は、約7mm

※ クリアファイルは「高透明」のものを使用します。写真は KING JIM製 735T、733US を使っています。

人間を救うのは、人間だ。Our world. Your move.

# フェイスシールドの作り方(2)

書類を入れる側の角を丸く切り落とします。



折り目に添ってカッターを入れ、2枚にします。

※ カッターは固定したままで、クリアファイル側を動かします。





# フェイスシールドの作り方 (3)



武蔵野赤十字病院

クリアファイルの長辺（カッターで切った側）を2つに折り、折り目を付けます。

さらに2つに折り、折り目を付けます。  
同様に反対側も2つに折り、計3か所に折り目を付けます。



人間を救うのは、人間だ。Our world. Your move.


# フェイスシールドの作り方(4)



武蔵野赤十字病院

外側に付けた折り目を目印に、パンチで穴をあけます。同様に反対側もパンチで穴をあけます。

## 完成!

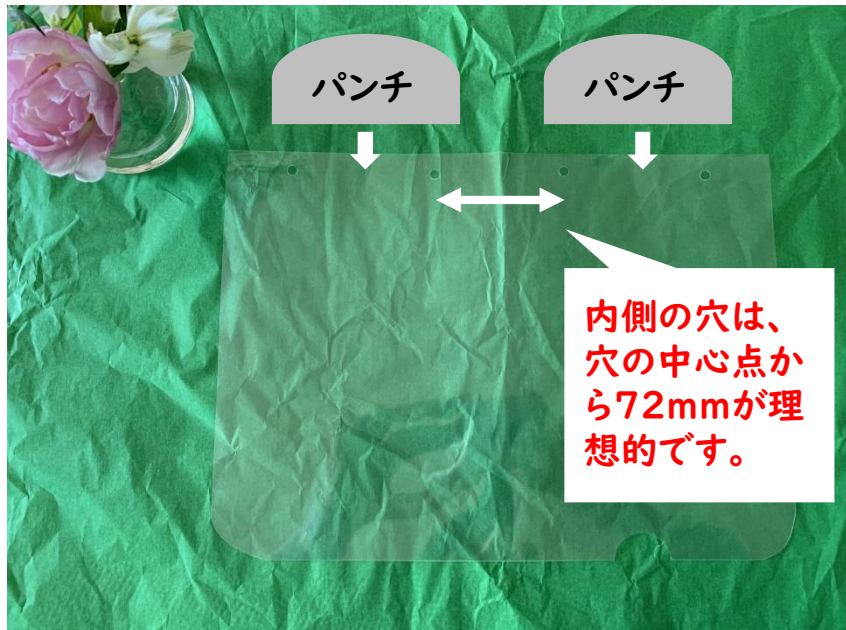

人間を救うのは、人間だ。Our world. Your move.